
 <p>Tecnología al servicio de la Construcción</p>	<p align="center">Instructivo de Proceso de Contenido de Sólidos</p>	<p align="center">Código: LL-CC-I-03</p>
<p>Elaborado por: Gestor de Calidad</p>	<p>Aprobado por: Gerente de Producción</p>	<p>Edición: 04 Fecha: 20161001</p>

1) Verificar que el medidor de sólidos este en cero y temperatura a 150°C



2) Abrir programa *RsWeight* en computadora

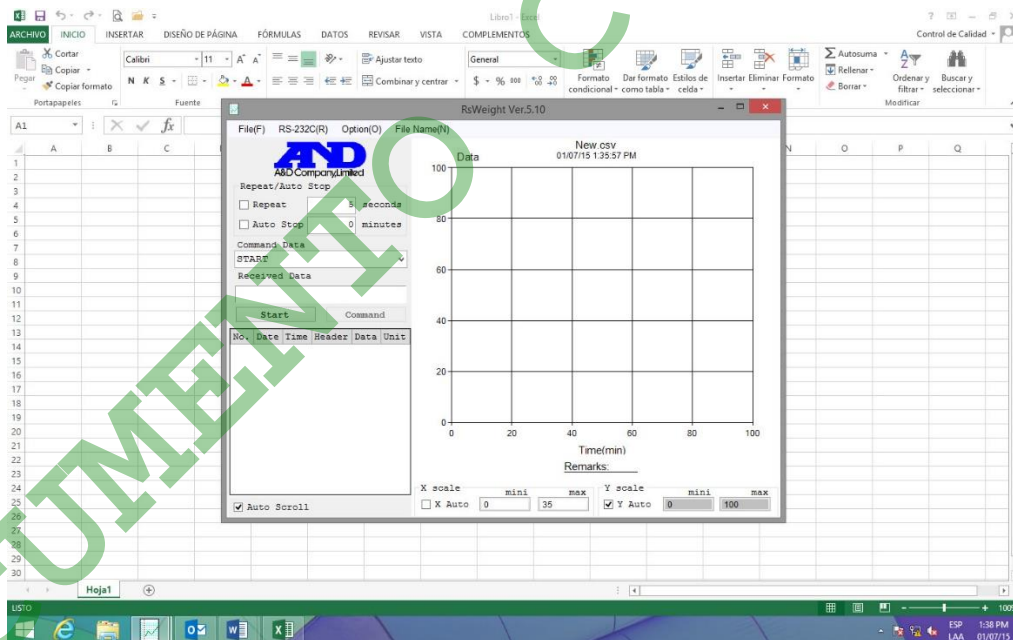



 Tecnología al servicio de la Construcción	Instructivo de Proceso de Contenido de Sólidos	Código: LL-CC-I-03
Elaborado por: Gestor de Calidad	Aprobado por: Gerente de Producción	Edición: 04 Fecha: 20161001

3) Ir a la Barra De Menú, Buscar la Opción RS232C(R) y Seleccionar la Opción COM Port(C) y seleccionar el Puerto Con El Que se Trabaja


Seleccionar COM1 Para Activar Analizador De Humedad#1

Seleccionar COM6 Para Activar Analizador De Humedad#2

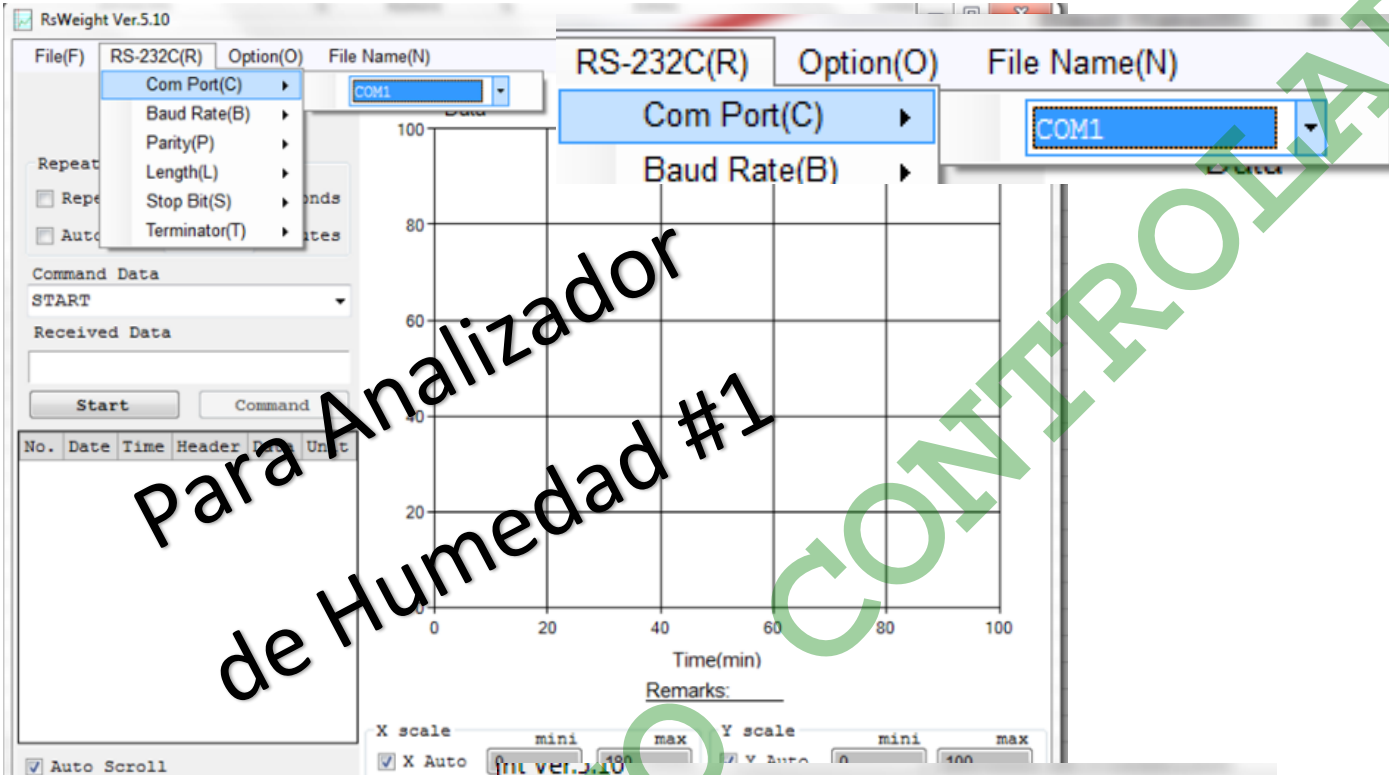

 <p>Tecnología al servicio de la Construcción</p>	<p>Instructivo de Proceso de Contenido de Sólidos</p>	<p>Código: LL-CC-I-03</p>
<p>Elaborado por: Gestor de Calidad</p>	<p>Aprobado por: Gerente de Producción</p>	<p>Edición: 04 Fecha: 20161001</p>


4) Verificar que en El Programa *RsWeight* este seleccionado el Comando Repeat 5 Seconds

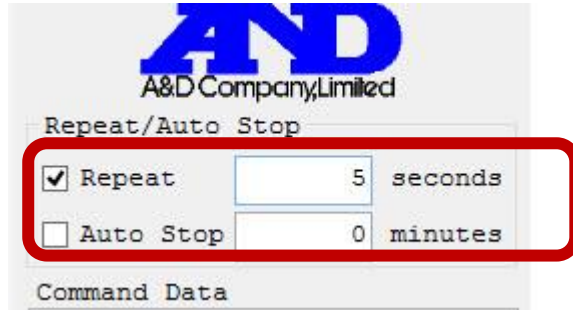

5) Agregar 10 gr de muestra de producto y cerrar la tapa del medidor.





6) Ir al programa *RsWeight* y Colocar START en COMMAND DATA luego dar Clic en START

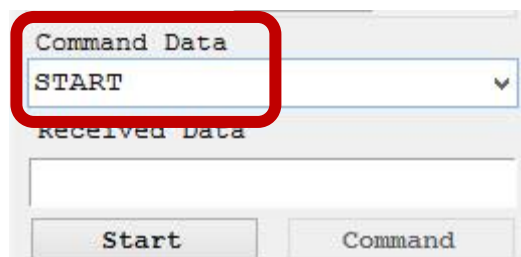

 <p>Tecnología al servicio de la Construcción</p>	<p align="center">Instructivo de Proceso de Contenido de Sólidos</p>	<p align="center">Código: LL-CC-I-03</p>
<p>Elaborado por: Gestor de Calidad</p>	<p>Aprobado por: Gerente de Producción</p>	<p>Edición: 04 Fecha: 20161001</p>

7) Cuando Comience A trabajar el Analizador de Humedad, En COMMAND DATA se escribe el Comando QM, para que despliegue los datos en la Grafica

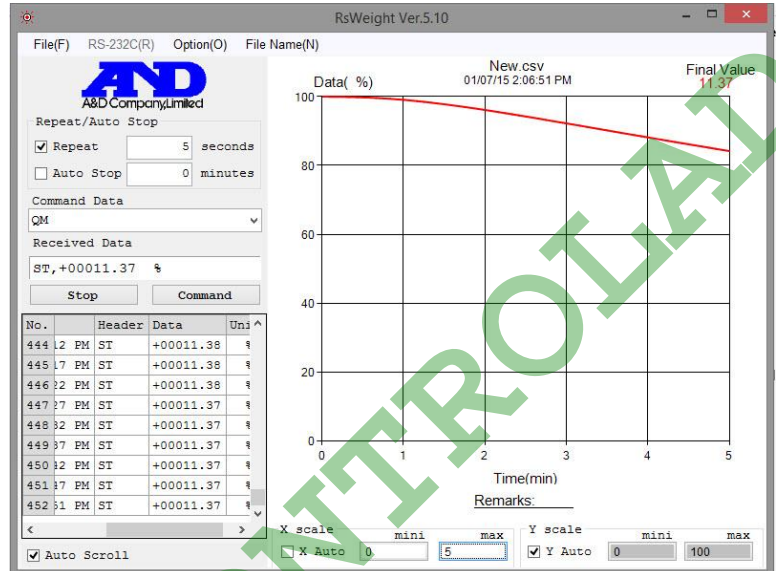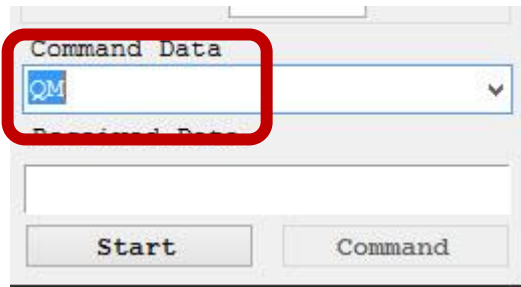


8) Verificar que el medidor este trabajando.




9) Al observar que el medidor termino de analizar la muestra (aparece **END** en pantalla del medidor)



 Lazarus & Lazarus <small>Tecnología al servicio de la Construcción</small>	Instructivo de Proceso de Contenido de Sólidos	Código: LL-CC-I-03
Elaborado por: Gestor de Calidad	Aprobado por: Gerente de Producción	Edición: 04 Fecha: 20161001

10) Ir al programa *RsWeight* y hacer click en *FILE* e ir a *SAVE* dar click en *Data Save*

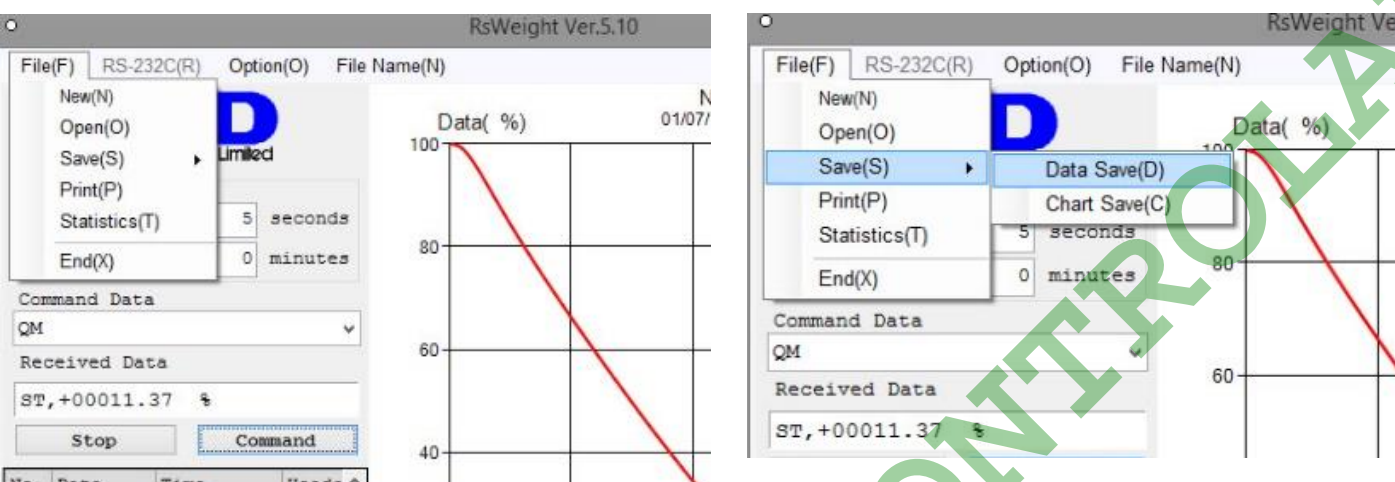

11) Al aparecer barra para nombrar se coloca primero el **NÚMERO DE LOTE Y SEGUIDAMENTE EL NOMBRE DEL PRODUCTO** luego dar click en **GUARDAR**. (en la Carpeta \\Lawinsap1\users\Control-Calidad\CONTROL DE CALIDAD\Analizador Contenido De Sólidos)

